



URIT-3000Plus

Analizador de Hematologia 3 Partes

- Armazenamento de mais de 100.000 testes com histogramas
- 21 parâmetros simultâneos
- Display de LCD colorido, com 10,4"
- Dados de atualização e backup via USB
- Gerenciamento de dados com mouse e teclado
- Baixa manutenção
- Realização de 60 amostras por hora
- Impressora térmica interna
- Porta paralela USB para impressora externa
- Leitura com sangue total ou pré-diluído

MH Lab

Especificações

Parâmetros: WBC, LY#, MID#, GRAN#, LY%, MID%, GRAN%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR

Diferenciação, 3-parte do WBC, 21 parâmetros e 03 histogramas

Princípios de operação: WBC/RBC/PLT: Impedância elétrica

HGB: Colorimetria fotoelétrica

Volume de aspiração: 10µl com sangue total e 20µl com pré-diluído

Diâmetro de abertura: WBC 100µm, RBC/PLT 70µm

Taxa de transferência: 60 amostras por hora

Armazenamento de dados: Mais de 100.000 resultados de amostra com histogramas

Alarmes: Mensagens de erro

Relação de diluição:	Sangue Total	Sangue Capilar
WBC/HGB	1:232	1:400
RBC/PLT	1:40000	1:45000

Display: 10,4" em LCD, colorido e com resolução de 640X4800



Dimensão: 330mm x 440mm x 500mm

Alimentação: AC 100V --- 240V, 50/60Hz

Entrada / Saída: Suporte RS232, padrão de rede e porta USB, teclas de atalho, mouse e teclado padrão QWERTY.

Impressora térmica interna 57mm

Porta paralela e entrada USB para impressora externa

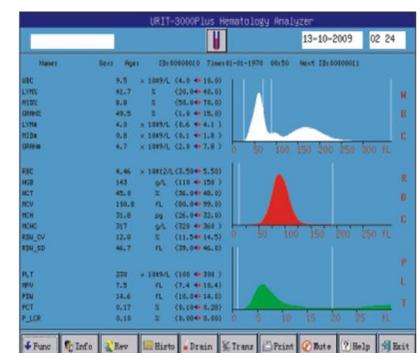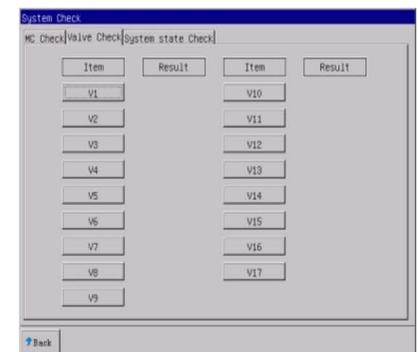

Características

- Visor LCD grande, colorido e sistema operacional Linux
- Suporte USB para dados de atualização de backup e sistema
- Excelente gerenciamento de dados com mouse e teclado
- Sistema de controle de alta eficiência e baixa manutenção

Distribuidor:



MH Equipamentos e Materiais Para Laboratórios Ltda.
Rua Guaraiúva, 422 - Brooklin - São Paulo / SP - 04569-000 - Brasil
Fone/Fax: 55 11 5102-4433 - E-mail mh@mhlab.com.br - Site: www.mhlab.com.br

R.M.S. 80223480035

Fabricado por:
URIT MEDICAL

